




Paradiso

01

Ergoline

Avantgarde Integrale TIPO 3

Lettino anatomico “Body wave” molto confortevole. Ottima ventilazione con climatizzatore integrato, musica e voce guida.

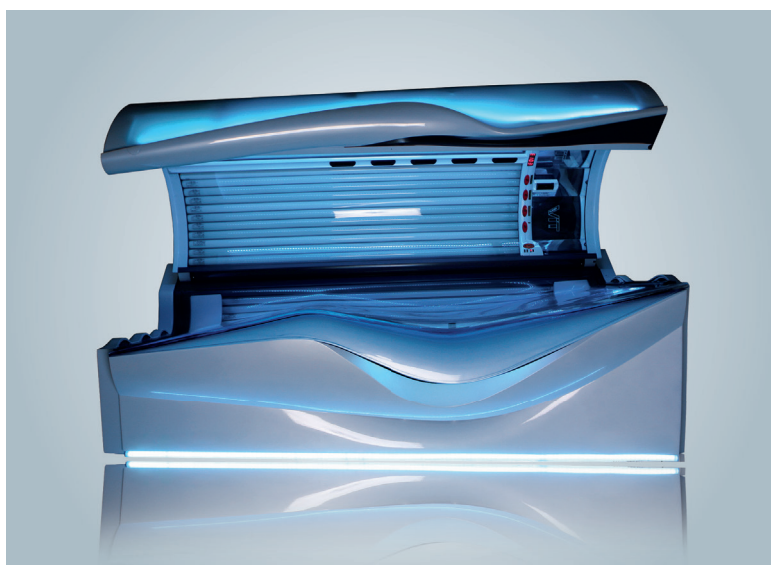

Programma di esposizione per Avantgarde

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	7 min	18 min	20-35 min	
	Prima seduta con pelle non abbronzata	Seconda seduta con pelle non abbronzata	Sedute successive	
Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)
1ª seduta su pelle non abbronzata	7 min	100 J/m²	48 h	134 J/m²
2ª seduta su pelle non abbronzata	18 min	250 J/m²	48 h	346 J/m²
Seduta No. 1	20 min	280 J/m²	48 h	384 J/m²
Seduta No. 2	25 min	360 J/m²	48 h	480 J/m²
Seduta No. 3	30 min	430 J/m²	48 h	576 J/m²
Dalla 4ª seduta	35 min	500 J/m²	48 h	672 J/m²



Paradiso

02

Ergoline

Smart Tan
Affinity 990
Integrale
TIPO 3



Un magico mix di UV, per l'abbronzatura e la vitamina D e di "Beauty light", per stimolare la produzione di collagene. Lampade alta pressione sul viso + spaghetti "UVB & beauty". Aroma, "Aqua fresh", "Climatronic", voce guida e musica.

Programma di esposizione per Smart Tan Affinity 990

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	6 min	Prima seduta con pelle non abbronzata	11 min	Seconda seduta con pelle non abbronzata	13-27 min	Sedute successive
Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)		
1ª seduta su pelle non abbronzata	6 min	97,2 J/m²	48 h	151,9 J/m²		
2ª seduta su pelle non abbronzata	11 min	178,2 J/m²	48 h	278,5 J/m²		
Seduta No. 1	13 min	210,6 J/m²	48 h	329,2 J/m²		
Seduta No. 2	14 min	226,8 J/m²	48 h	354,5 J/m²		
Seduta No. 3	16 min	259,2 J/m²	48 h	405,1 J/m²		
Seduta No. 4	20 min	324,0 J/m²	48 h	506,4 J/m²		
Seduta No. 5	22 min	356,4 J/m²	48 h	557,0 J/m²		
Seduta No. 6	24 min	388,8 J/m²	48 h	607,7 J/m²		
Dalla 7ª seduta	27 min	437,4 J/m²	48 h	683,6 J/m²		



Paradiso

03


Ergoline

Smart Tan

Sunrise 7200

Doccia Solare Integrata

TIPO 3

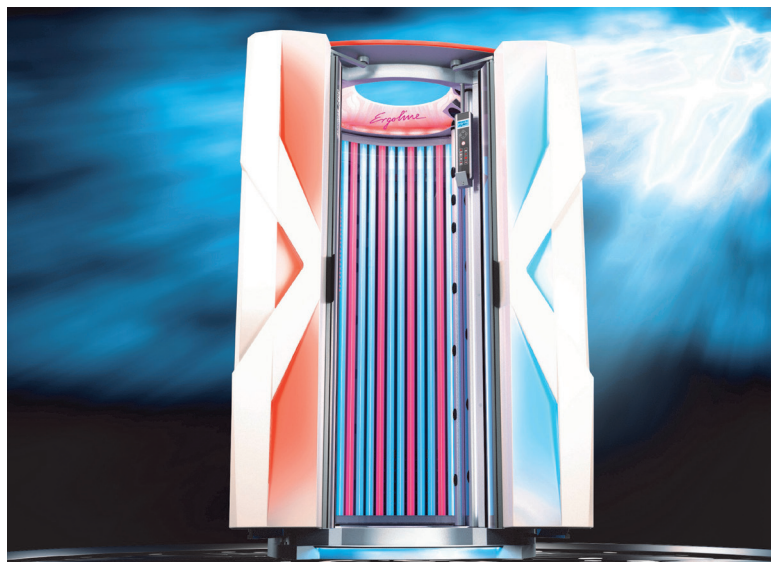

Un mix di UV, per l'abbronzatura e la vitamina D e di "Beauty light" per stimolare la produzione di collagene, booster di "Beauty LED" sul viso.

E mentre ti abbronzì fai fitness o ti rilassi con la pedana "Vibra-Shape".

Voce guida e musica.

Programma di esposizione per Smart Tan Sunrise 7200

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	6 min	Prima seduta con pelle non abbronzata	10 min	Seconda seduta con pelle non abbronzata	13-27 min	Sedute successive
Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)		
1ª seduta su pelle non abbronzata	6 min	99,0 J/m²	48 h	150,1 J/m²		
2ª seduta su pelle non abbronzata	10 min	165,0 J/m²	48 h	250,2 J/m²		
Seduta No. 1	13 min	214,5 J/m²	48 h	325,3 J/m²		
Seduta No. 2	14 min	231,0 J/m²	48 h	350,3 J/m²		
Seduta No. 3	16 min	264,0 J/m²	48 h	400,3 J/m²		
Seduta No. 4	20 min	330,0 J/m²	48 h	500,4 J/m²		
Seduta No. 5	21 min	346,5 J/m²	48 h	525,4 J/m²		
Seduta No. 6	24 min	396,0 J/m²	48 h	600,5 J/m²		
Dalla 7ª seduta	27 min	445,5 J/m²	48 h	675,5 J/m²		



Paradiso

04

Ergoline

Open Sun Pilot

Mezzo busto

TIPO 3



Per abbronzare solo il viso,
la schiena, il décolleté e le mani.
Voce guida e musica.

Programma di esposizione per Open Sun Pilot

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	6 min	14 min	20-33 min	
	Prima seduta con pelle non abbronzata	Seconda seduta con pelle non abbronzata	Sedute successive	
Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)
1ª seduta su pelle non abbronzata	6 min	100 J/m²	48 h	162 J/m²
2ª seduta su pelle non abbronzata	14 min	250 J/m²	48 h	378 J/m²
Seduta No. 1	20 min	360 J/m²	48 h	540 J/m²
Seduta No. 2	25 min	450 J/m²	48 h	675 J/m²
Seduta No. 3	30 min	540 J/m²	48 h	810 J/m²
Dalla 4ª seduta	33 min	600 J/m²	48 h	891 J/m²



Paradiso

05

Ergoline

Smart Tan

Prestige 1100

Integrale

TIPO 3



Lampade alta pressione sul viso + spaghetti "UVB & beauty".

Sistema elettronico che mantiene l'emissione UV senza variazioni.

Un mix di UV, per l'abbronzatura e la vitamina D e di "Beauty light", per stimolare la produzione di collagene.

Aroma, "Aqua fresh", "Climatronic", voce guida e musica.

Programma di esposizione per Smart Tan Prestige 1100

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	5 min	Prima seduta con pelle non abbronzata	10 min	Seconda seduta con pelle non abbronzata	12-26 min	Sedute successive
Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)		
1ª seduta su pelle non abbronzata	5 min	85,50 J/m²	48 h	125,70 J/m²		
2ª seduta su pelle non abbronzata	10 min	171,00 J/m²	48 h	251,40 J/m²		
Seduta No. 1	12 min	205,20 J/m²	48 h	301,68 J/m²		
Seduta No. 2	14 min	239,40 J/m²	48 h	351,96 J/m²		
Seduta No. 3	15 min	256,50 J/m²	48 h	377,10 J/m²		
Seduta No. 4	19 min	324,90 J/m²	48 h	477,66 J/m²		
Seduta No. 5	21 min	359,10 J/m²	48 h	527,94 J/m²		
Seduta No. 6	23 min	393,30 J/m²	48 h	578,22 J/m²		
Dalla 7ª seduta	26 min	444,60 J/m²	48 h	653,64 J/m²		



Paradiso

06

Ergoline

Smart Tan

Prestige 1600

Integrale

TIPO 3



Un mix di UV, per l'abbronzatura e la vitamina D e di "Beauty light", per stimolare la produzione di collagene. Lampade alta pressione sul viso + spaghetti "Smart Tan" + 4 pannelli LED "Beauty light" che restano accesi anche se si spegne il settore UV sul viso. Possibilità di memorizzare le proprie preferenze per le sedute seguenti. Aroma, "Aqua fresh", "Climatronic", voce guida e musica.

Programma di esposizione per Smart Tan Prestige 1600

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	5 min	Prima seduta con pelle non abbronzata	10 min	Seconda seduta con pelle non abbronzata	12-25 min	Sedute successive
Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)		
1ª seduta su pelle non abbronzata	5 min	87,60 J/m²	48 h	132,30 J/m²		
2ª seduta su pelle non abbronzata	10 min	175,20 J/m²	48 h	264,60 J/m²		
Seduta No. 1	12 min	210,24 J/m²	48 h	317,52 J/m²		
Seduta No. 2	13 min	227,76 J/m²	48 h	343,98 J/m²		
Seduta No. 3	15 min	262,80 J/m²	48 h	396,90 J/m²		
Seduta No. 4	18 min	315,36 J/m²	48 h	476,28 J/m²		
Seduta No. 5	20 min	350,40 J/m²	48 h	529,20 J/m²		
Seduta No. 6	22 min	385,44 J/m²	48 h	582,12 J/m²		
Dalla 7ª seduta	25 min	438,00 J/m²	48 h	661,50 J/m²		



Paradiso

07

Ergoline

Smart Tan Collarium
Excellence
Integrale
TIPO 3



Un lettino che oltre ad abbronzare e sintetizzare vitamina D intensifica al massimo la produzione di collagene. Lampade per le spalle e la nuca. Aroma, "Aqua fresh", "Climatronic", voce guida e musica.

Programma di esposizione per Smart Tan Collarium Excellence

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	6 min	14 min	20-33 min	
	Prima seduta con pelle non abbronzata	Seconda seduta con pelle non abbronzata	Sedute successive	
Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)
1ª seduta su pelle non abbronzata	6 min	100 J/m²	48 h	124 J/m²
2ª seduta su pelle non abbronzata	14 min	250 J/m²	48 h	288 J/m²
Seduta No. 1	20 min	360 J/m²	48 h	412 J/m²
Seduta No. 2	25 min	450 J/m²	48 h	515 J/m²
Seduta No. 3	30 min	540 J/m²	48 h	618 J/m²
Dalla 4ª seduta	33 min	600 J/m²	48 h	680 J/m²